

PRODUCTO :
MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS OFICINALES DE LA MARCA
BIOALTERNA :PASSIFLORA, CALÉNDULA, PEELING,
HUMECTANTE, NUTRITIVA, REEDUCADOR GÁSTRICO, GINKGO
BILOBA, CONTORNO DE OJOS, FUCUS VES D6, DIABETES
HAMAMELIS Y CARBO VEGETABILI

Los productos mostrados en la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal y fraudulenta.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:
invimafv@invima.gov.co



Mas información
consulte aqui



**PRODUCTO
COLLAGEN PEPTIDES TOPLUX
NUTRITION**

El producto mostrado en la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal y fraudulenta.

**Si desea obtener mayor información
comuníquese con el Invima a:
invimafv@invima.gov.co**



**Mas información
consulte aqui**



**PRODUCTO
TIRZEPATIDA INYECTABLE 20mg/2mL**

El producto mostrado en la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal y fraudulenta.

**Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:
invimafv@invima.gov.co**



TIRZEPATIDA
Vacuna de la obesidad
INSUMOS DE CALIDAD



**50%
Descuento**



**PREGUNTA POR EL
CATALOGO**

**Mas información
consulte aqui**





**PRODUCTO :
MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS OFICINALES DE LA
MARCA BIOALTERNA :DRENADOR HEPÁTICO,**

**ESCORPIÓN AZUL,
CBD ,4+ MAGNESIO PLUSS, ECHINACEA, GEL CALIENTE,
XALT PURGANTE, QUEMAGRASS
+ ANTIANSIEDAD, ENGYS, LUFA OPERCULATA D3 Y
TRAUMAC CREMA**

**Los productos mostrados en la imagen no cuentan con
registro sanitario emitido por la autoridad competente, por
lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal y
fraudulenta.**

**Si desea obtener mayor información comuníquese con
el Invima a: invimafv@invima.gov.co**



**Mas información
consulte aqui**



**PRODUCTO :
MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS OFICINALES DE LA
MARCA BIOALTERNA :RESVERATROL, QUEMA PLUS,
OSCILLOCOCCINUM, GINSENG, LYCOPODIUM,
TONGKAT ALI, NUX VOMICA, DETOX,
VALERIANA, TRANSFACTOR Y COLÁGENO**

**Los productos mostrados en la imagen no cuenta con
registro sanitario emitido por la autoridad competente,
por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal
y fraudulenta.**

**Si desea obtener mayor información
comuníquese con el Invima a:
invimafv@invima.gov.co**



**Mas información
consulte aqui**






**PRODUCTO
FRAUDULENTO (FALSIFICADO) DIPROSPAN
INYECTABLE**

SUSPENSIÓN 1 ampolla X 2mL Lote C130548

El producto mostrado en la imagen Este producto falsificado no corresponde a una importación realizada por ORGANON COLOMBIA S.A.S porque la presentación del producto y el arte de su empaque difiere de la información aprobada por elInvima.

**Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:
invimafv@invima.gov.co**

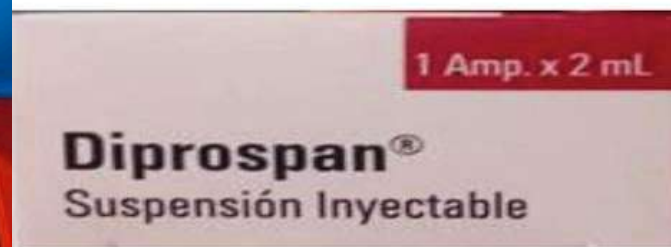


Lote:
Fab.: C130548
Cad.: 02 JUL 2025
02 ENE 2027

Fabricado por: Organon Heist bv., Heist-op-den-Berg - Bélgica.
Titular: Organon LLC., Jersey City - Estados Unidos.
Importado y distribuido por: Organon-Ecuador S.A., Quito - Ecuador.
Reg. San. N° 26.672-10-05
© 2023 Grupo de compañías Organon. Todos los derechos reservados. Marca Registrada

Fórmula:
Cada mL de suspensión inyectable contiene:
Betametasona 5.00 mg (como Dipropionato)
Betametasona 2.00 mg (como Fosfato Sódico)
Excipientes c.s.p. 1.00 mL
Via de administración: Intramuscular, intraarticular, intratecal y tejido blando.
Diprospan no es para uso intravenoso.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. Este medicamento contiene alcohol bencílico, no usar en neonatos.
Leer prospecto adjunto antes de utilizar este medicamento.
Dosis: La que el médico señale. No exceder la dosis prescrita.
Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños. Agitar bien antes de usar.

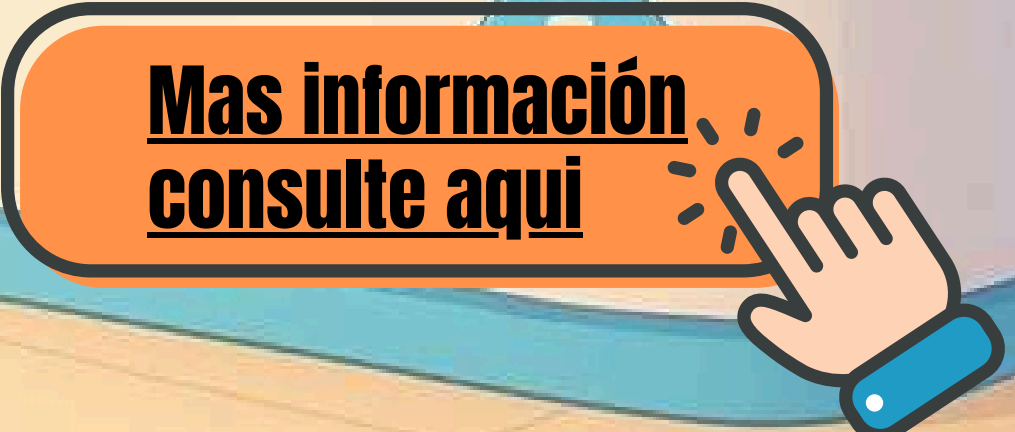



**PRODUCTO
FRAUDULENTO (FALSIFICADO) DIPROSPAN
INYECTABLE
SUSPENSIÓN 1 ampolla X 2mL Lote C130548**

El productomostrado enlaimagen no cuentacon registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal.

**Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:
invimafv@invima.gov.co**



**Mas información
consulte aqui**



**FARMA
BOOM**


VITROS Chemistry Products Mg Slides y VITROS Chemistry Products Mg Slides

**Lote / Serial Todos los lotes presentes y
futuros**

Los cartuchos mencionados pueden no cumplir la especificación de estabilidad "en analizador" de 2 semanas al almacenarse en el sistema VITROS, debido a una deriva o sesgo negativo que supera 2 desviaciones estándar del laboratorio (WLSD) antes del plazo. Esto provoca fallas en controles de calidad (QC), retrasos por repetir QC o cambiar cartuchos

**Comuníquese con el importador,
distribuidor o comercializador para
precisar si existen recomendaciones
específicas**

CONSULTA AQUI

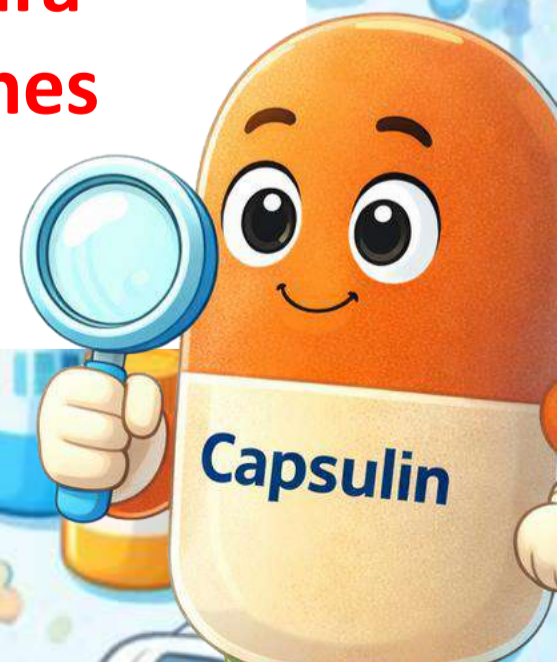

**FARMA
BOOM**

IMMULITE 1000/2000 INTACT PTH

Lote(s) / Serial(es): 387, 388, 389

Los lotes 387, 388 y 389 del ensayo IMMULITE 2000/2000 XPi iPTH muestran sesgo negativo en resultados de PTH intacta (suero y plasma), con promedio de -28% (rango 0% a -72%) en 3-92 pg/mL, variaciones en muestras <3 pg/mL y sin evaluación para >100 pg/mL por limitaciones de método

NOTA: El lote no ha sido importado, ni comercializado en el país.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

STA NeoPTimal 5

Lote / Serial 272933

Usado para medir INR en control de anticoagulantes orales (AVK), tiene un error en las Hojas de Valores Asignados del lote 272933: omita el ISI específico de 1,02 para el analizador Start Max y solo muestra el ISI de 1,12 para STA-R, STA Compact y STA Satellite. Esto genera resultados de INR hasta 0,25 unidades más altos (dentro del rango terapéutico 2,00-3,00) si se usa el factor incorrecto.

NOTA: El lote no ha sido importado, ni comercializado en el país.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

VIDAS RUB IgG II

Lote / Serial 1011591810

El kit tiene un defecto de impresión en el código de barras MLE de la etiqueta, no escaneable en el sistema VIDAS® aunque pasó control visual inicial, causando fallos automáticos y retrasos en resultados de IgG anti-rubéola (RBG); solo afecta este lote, sin impacto en calidad química/biológica del reactivo.

**Comuníquese con el importador,
distribuidor o comercializador para
precisar si existen recomendaciones
específicas**

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

MUREX HBSAG V3

**Lote(s) / Serial(es): A009510, A011310,
A014310**

Los lotes listados generan resultados de control positivo por debajo de los criterios establecidos en las Instrucciones de Uso (IFU), lo que invalida todo el ensayo e impide interpretar resultados de pacientes. Además, estos kits no cumplen la sensibilidad analítica declarada en IFU frente al Tercer Estándar Internacional OMS HBsAg (código NIBSC: 12/226).

NOTA: Identificar si cuenta con los lotes informados, pasar a cuarentena los kits en uso o en stock, y retornarlos al importador cuando se programe la recolección.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

LIAISON ® RUBELLA IGM

Lote / Serial 316026

Referencia 310730

Usado con control LIAISON® Control Rubella IgM (REF 310731), omita la Nota para el Usuario (NFTU) 300/001-554 requerida en el empaque; sin ella, rangos estándar del kit generan resultados de control positivo bajos/fuera de rango, invalidando corridas y bloqueando reportes de pacientes

NOTA: El importador realiza comunicación con clientes y seguimiento al desempeño del producto.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Bomba de insulina y sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real Guardian, Paradigm y MiniMed Silhouette, MiniLink Medtronic

Serie 600 y Serie 700, Varios lotes.

Pueden presentar variaciones leves en la dosis administrada según su posición respecto al sitio de infusión: si la bomba está más de 35 cm por encima, la gravedad favorece el flujo excesivo de insulina (riesgo de hipoglucemia); si está por debajo, se administra menos insulina de la esperada (riesgo de hiperglucemia), afectando más a pacientes con dosis bajas o alta sensibilidad insulínica.

Nota: Proveedor actualizará las guías de usuario

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Sistema de transporte neonatal TI
500 Globe – Trotter TM Dräger /
Sistema de transporte neonatal

**Referencia(s) / Código(s): 101561400,
101561401**

Durante el montaje de la carcasa del equipo F120 Dräger, baterías de repuesto con terminales eléctricos sobresalientes en el borde exterior, pueden generar contacto accidental con la conexión al girar o inclinar la carcasa, provocando cortocircuito en las conexiones expuestas del tornillo de fijación.

NOTA: Fabricante proporcionará tapas protectoras para cubrir conexiones afectadas, instrucciones de montaje seguro y baterías alternativas futuras

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Tubo para recolección al vacío para serología

**Lote(s) / Serial(es): C2511348; C250933Y;
C2511345; C25113NF; C251035G**

Posible riesgo de llenado incorrecto, hemólisis o contaminación en el sistema para Toma de Sangre al Vacío, tras queja de cliente por grumos en el gel separador y formación de fibrina post-centrifugación.

NOTA: Interrupción inmediata del uso de los lotes mencionados, identificarlos, aislarlos y devolverlos según instrucciones.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

BioFlo Duramax with Endexo Technology Chronic Hemodialysis Catheter / BioFlo Duramax con catéter de hemodiálisis crónica tecnología Endexo

Lote(s) / Serial(es): Varios

En algunos casos, los introductores de vaina divisible no se separan correctamente por ranurado insuficiente en la funda (baja probabilidad), causando hemorragia, cuerpos extraños o retrasos en las intervenciones.

NOTA: Solicita dejar de usar inmediatamente el introductor de doble válvula y funda divisible de 16 F, destruyéndolo en punto de uso.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Instrumentos quirúrgicos ortopédicos

E28 205 – Helical bone chisel (tamaño estándar), E28 226 – Helical bone chisel tamaño XS

Determinados lotes de instrumentos quirúrgicos tipo Ciseau d'hélice presentan afilado insuficiente en el borde de ataque de la hoja helicoidal por no conformidad en el proceso de fabricación, comprometiendo el desempeño mecánico al preparar el lecho óseo glenoideo.

Nota: Se requiere identificación y trazabilidad de lotes afectados, comunicación inmediata a usuarios y retiro para intercambio.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

3M Tegaderm Pad; 3M
Tegaderm IV Advanced

Lote(s) / Serial(es): (80284930276)
2524100367; (80284930345)
2601201141.

Algunos lotes de apósitos se enviaron a clientes sin esterilización adecuada, por fallos en identificación de material no conforme y/o transferencia incorrecta de inventario en cuarentena (intercambio de envases primarios o prueba de sellado fallida)

NOTA: Se indica destrucción de lotes afectados en punto de uso o devolución al fabricante para los que ya fueron distribuidos.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Vitros XT 7600 Integrated System - sistema integrado Vitros XT 7600, accesorios y repuestos - Vitros XT 3400 Chemistry System - sistema de química Vitros XT 3400, software, accesorios y repuestos - sistema Vitros 4600 - Vitros 4600

Lote / Serial VITROS™ (4600 / 5600 / XT3400 / XT7600).

En versiones de software ADD 6359 a 6365 al intentar cargar el Kit de Calibración VITROS™ 32 seleccionando "Usar kit de corriente", cambia automáticamente al Kit VITROS™ 2, impidiendo calibrar correctamente las pruebas Na⁺, K⁺, Cl⁻ y ECO₂.

NOTA: Fabricante emitió un comunicado oficial con medidas correctivas y recomendaciones para manejo.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

DeepUnity PacsOnWeb: Software para el Sistema de Almacenamiento y Comunicación de Imágenes Diagnósticas

Referencia: DeepUnity PACSonWEB

En el software al cambiar un paciente en órdenes con múltiples procedimientos, el sistema no desvincula correctamente el informe original: genera alerta HL7 que restringe acceso al estudio afectado, pero deja el informe vinculado sin alertas para otros procedimientos relacionados, consolidando datos cruzados de distintos pacientes que requieren revisión/corrección manual.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto

CONSULTA AQUI



Capsulin



**FARMA
BOOM**

Equipo de rayos X, accesorios y repuestos

Lote / Serial: MP41EB051001

inconsistencia técnica en el etiquetado del colimador R-20J del equipo de rayos X digital RADspeed: la etiqueta del marcador láser muestra incorrectamente el año 2001 en lugar de 2007 como referencia del estándar aplicable, por error de impresión.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Lentes de contacto blandos – stenfilcon A

Referencia(s) / Código(s): MyDay Toric

Error en la impresión local de parámetros de graduación (UDI) en la caja de venta de lentes, por dato incorrecto en la tabla de mapeo del sistema UDI-GEN implementado en Taiwán desde enero 2026, modificado accidentalmente por operación local.

NOTA: El importador informa que el producto involucrado no se distribuyó en Colombia.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Avitene Ultrafoam Collagen Sponge / AVITENE™; ULTRAFOAM™

Lote(s) / Serial(es): WBJ50055

El producto afectado podría contener material extraño dentro del envase estéril (subensamblaje Avitene Bulk Flour), debido a una posible introducción ambiental durante la fabricación.

NOTA: El importador Becton Dickinson Colombia Ltda confirma que el producto involucrado no se importó, ni distribuyó en Colombia.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

VUE PACS: sistema de almacenamiento y distribución de imágenes PACS

Lote / Serial Vue Motion v12.2.0 a v12.2.8.500

Un problema de software que afecta a Philips Vue Motion v12.2.0 - v12.2.8.500, en el cual los fotogramas desordenados de Vue Motion durante los ciclos de cine dinámico provocarían que los fotogramas de las imágenes se muestren fuera de secuencia.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas.

[CONSULTA AQUI](#)



ENSITE X EP System: sistema de electrofisiología

Lote / Serial:

**102630001,102640001,103260001,10327
0001,105310001,105320001**

Fallas en el módulo por falta de conexión de parches (electrodo de pierna izquierda), generando error "Error de datos en el módulo del electrodo de pierna izquierda. Reinserte el módulo de datos y revalide."

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas.

CONSULTA AQUI

**FARMA
BOOM**

IDKit Hp Two bolsas de aliento

Lote / Serial 25P521MB1

Falla aleatoria de inflado o pérdida de muestra en bolsas de aliento del lote 25P521MB1 (lotes internos 20524/393255), por problema de fabricación que impide contener la cantidad adecuada de aire para pruebas correctas, afectando la oportunidad de resultados y flujo clínico sin riesgo de diagnóstico para los pacientes.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Mazor X Stealth Edition - instrumento estereotáxico

Lote / Serial TPL0059 Mazor X system

Múltiples anomalías en el sistema Mazor X™ (versiones de software 5.0.1, 5.1.2 y 5.1.3). Estas incluyen: imprecisiones en la validación de ejes del Sistema de Referencia Ósea; montaje automático de tornillos incompatibles; movimientos robóticos fuera del volumen de trabajo; cambios incorrectos en volúmenes predeterminados; uso de herramientas fuera del área registrada.

NOTA: Esta nota de seguridad no impacta a Colombia, ya que no se comercializó ninguna

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Sistema de catéteres de Swan-Ganz

Lote / Serial 10026266003

Incremento inusual de quejas (UVA: 16 fallas de un reclamante; VCU: 61 fallas de 17 reclamantes) en enero 2026 por fugas/desgarros en hub proximal de inyección (PN 1002626003) del catéter Swan-Ganz modelo 8317FS, asociado a cambios de manufactura de enero 2024 para cumplir ISO 80369-7 (UER).

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Esterilizadores - accesorios y repuestos - esterilizadores a vapor (autoclaves) para uso en ambientes hospitalarios

Getinge

Referencia Getinge HS-66 Series

Incidente donde un técnico resultó lesionado (pellizco/aplastamiento de dedos) al intentar ajustar manualmente una cesta que obstruía la puerta del esterilizador durante su cierre automático, tras activarla pese a la obstrucción en lugar de reabrirla.

NOTA: Funcionamiento normal del equipo y atribuyó el problema a error de uso.

CONSULTA AQUI



Insuflación para laparoscopia Olympus

Referencia(s) / Código(s): UHI, UHI-2, UHI-3 y UHI-E

El algoritmo de software en unidades de insuflación de flujo alto modelos UHI, UHI-2, UHI-3 y UHI-E puede causar sobrepresión por insuflación excesiva abdominal durante intervenciones, sin emitir alarma/notificación, ni aliviar presión a nivel establecido.

NOTA: El fabricante propone retirar del mercado los dispositivos afectados.

[CONSULTA AQUI](#)